


치료 확신을 극대화하기 위한  
통합 시스템

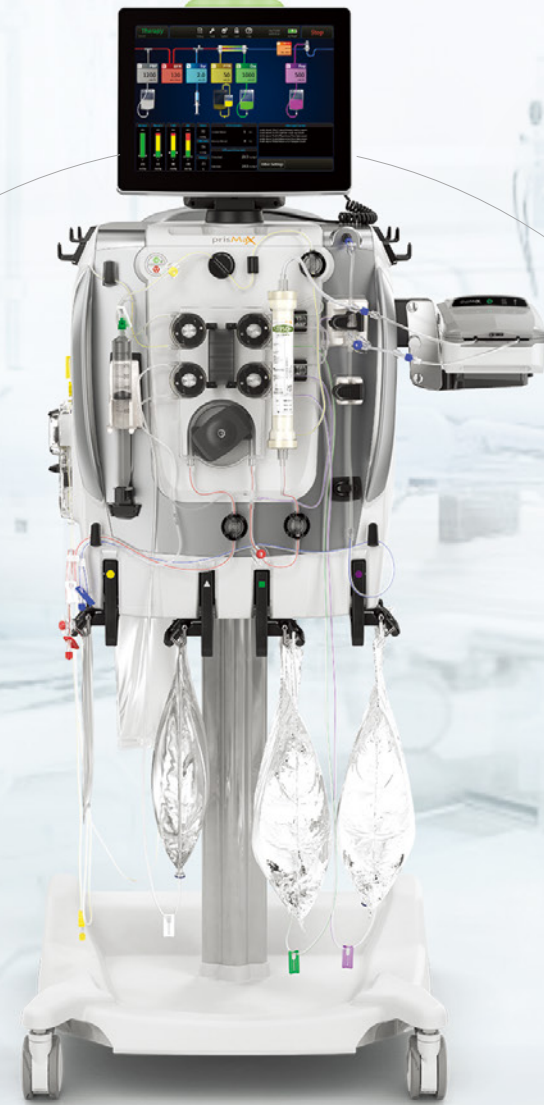

단순성 극대화

효율성 극대화

정확성 및  
시스템 성능  
극대화

치료옵션  
극대화

서비스  
및 지원

폭넓은  
포트폴리오

트레이닝  
및 교육



**Baxter**  
PrisMax  
ACUTE CARE SYSTEM



치료 진행에 대한 확신을 극대화할 수 있다면  
어떨지겠습니까?

**생명 구조 및 유지에 대한 교차점**

우리는 생명을 구하고 유지하는 혁신과 그것을 실현시키는 사람들이 만나는 중요한 교차점에서 일하고 있습니다. 우리는 환자의 치료 결과를 개선하고, 우리의 파트너가 ICU에서 끊임 없이 진화하는 도전에 잘 대처하고 기회와 만날 수 있도록 돕기 위해 노력하고 있습니다.

더욱 자세한 내용은 Baxter 담당자에게 문의해주시요.

여기에 언급된 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 사용자 매뉴얼 또는 사용설명서를 참조해주시요.

References

1. Baxter - PrisMax Operator Manual\_English\_ROW\_AW8005 Rev A Nov2018.
2. Baxter - PrisMax Limited Controlled Distribution Report #ER6877 Rev A. Data on file. 2018.
3. Baxter - TherMax Operator Manual\_English\_ROW\_AW7006 Rev A Nov2018.
4. Baxter - Heating coverage from TherMax. DPN18.13 2018.

서울시 종로구 종로1 교보생명빌딩 10층 1001호 | TEL: 02-6262-7100 | FAX: 02-6272-7101 | www.baxter.co.kr  
KO-AT12-210003

**Baxter**

CE  
0123

CRRT와 Organ Support Therapy를 위한 Baxter의  
next generation device, PrisMax 시스템을 만나보세요.

INTRODUCING  
**PrisMax**

## 중환자 관리에서 당신의 믿음직한 파트너가 되겠습니다.

### 생명을 구하고 유지하는 임무를 다하겠습니다.

우리는 모든 사람들이 건강하고 질병으로부터 자유로우며 가능성으로 가득 찬 삶을 살 기회가 있다고 믿습니다.

Baxter는 업계의 리더로서, 모든 고객에게 가장 효과적인 치료 및 중환자 관리 프로그램을 제공할 수 있도록 지속적으로 제품과 서비스를 혁신하기 위해 노력하고 있습니다. PrisMax 시스템은 치료 설정과 구현을 모니터 하고 human error를 줄이는 데 도움이 되는 통합 기능과 함께 안전성에 대한 Baxter의 약속을 기반으로 만듭니다.

## 고객의 요구에서 영감을 얻은 혁신으로 개발되었습니다.

의료 전문가들에게 ICU에 대한 다양하고, 끊임없는 변화 요구를 충족시키는 것은 매일의 도전과제입니다. 우리는 전 세계 50개 이상 ICU의 650명이 넘는 ICU 의료 전문가에게 그들의 가장 큰 도전과제를 해결하는데 도움을 줄 수 있는 방법을 문의하여 차세대 Acute care 기술을 개발하고자 했고, 이를 위해 중증 치료 전문가와 협력했습니다.

- CRRT 설치와 진행을 **단순화**했습니다.
- 기계와 상호작용을 줄여 **효율성**을 높였습니다.
- **치료 정확도와 시스템 성능**을 개선했습니다.

### PrisMax 시스템을 만나보세요.

Baxter의 PrisMax 시스템은 의료 전문가가 CRRT 및 Organ Support Therapy를 전달하는데 좀더 확신을 갖도록 설계되었습니다. 20년 이상 축적된 중증치료 전문지식을 바탕으로, PrisMax 시스템은 단순성, 효율성 및 정확성을 향상시켜 현재와 미래에 임상의가 치료 진행과 환자 관리의 질을 최대화할 수 있도록, ICU의 진화하는 요구를 충족시키는 것을 목표로 합니다.



## 기술이 치료 구행을 단순화시킬 수 있다면 어떨까요?

PrisMax 시스템은 CRRT 구현의 복잡함을 단순화하여 간호 부담을 줄일 수 있게 설계되었습니다.\*



**Touchscreen Interface**는 치료 설정과 관리를 단순화 합니다. 그리고 실수나 의도하지 않은 처방 변경을 예방하기 위해 잠가 두었습니다.†



**Color 코드화** 되어 있는 저울은 추가된 LED 등을 통해 사용자가 필요한 백의 중재를 바로 할 수 있게 도움을 줍니다.



**Therapy Profile**은 맞춤형 처방 설정을 저장하여 일관성을 높이고 세팅 속도를 높여줍니다.



**Patient Fluid Removal Catch-up**은 지능형 펌프 조절을 통해 처방된 환자수분 제거 목표를 충족시켜 치료가 잠시 중단 되더라도 의료진이 정확한 치료를 구현할 수 있도록 도와줍니다. PrisMax 시스템은 임상 환경에서 처방된 환자 수분 제거량의 정확도가 99.8%에 달합니다.2,†



**TherMax Blood Warmer**를 통한 온도 관리로 반환되는 혈액 온도를 35~38 ° C로 정밀하게 조절할 수 있습니다.3,† TherMax Blood Warmer는 기존의 CRRT 치료를 받는 환자 체온의 76% 이상으로 유지합니다.4,†

## 처방된 치료가 더 정확하게 진행될 수 있다면 어떨까요?

PrisMax 시스템의 유니크한 기술은 치료의 정확도와 시스템 성능을 개선하여 의료진의 치료 구현을 최적화합니다.

\*6개국의 8개 ICU에서 PrisMax 시스템으로 305번 치료를 시범적으로 평가한 데이터를 기반으로 함  
 †치료액을 통해서만 냉각함. 워머를 통해 혈액을 능동적으로 냉각하지 않음.  
 †In vitro 테스트를 기반으로 했으며, 임상에서의 결과는 In vitro 결과와 연관성이 없을 수 있음; 환자의 체온 37° C, 실내 및 fluid 온도 21 ° C



**Liquid Level Sensor**는 치료 중에 공기제거 챔버에서 Fluid 높이를 자동으로 조정하여 간호사가 이 기능을 수동적으로 실시할 필요를 줄여줍니다.



**Smart Alarms**는 기계와 상호작용 및 치료 중단을 줄이도록 설계되었습니다.†



**Auto-Effluent Drain Accessory**는 배액백 교체의 필요가 감소하여 치료 중재를 줄여줍니다. 비슷한 CRRT 시스템에 비해 백 교체를 60%까지 줄일 수 있으며,2,† 환자 당 1일 간호 시간 및 치료 중단 시간을 30분 절약할 수 있습니다.2,†



**Interactive On-Device and Online Training**은 의료진이 스스로 학습을 조절해서 지식을 확장하고 치료 구현에 대한 확신을 구축하게 합니다. PrisMax 시스템은 Kit 와 solution 을 사용하거나, 전혀 사용하지 않고 시행할 수 있는 시뮬레이션을 포함하여 탄탄한 교육 역량을 제공합니다.

## 혁신이 치료 진행을 더욱 효율적으로 만들 수 있다면 어떨까요?

PrisMax 시스템은 노동집약적인 업무를 자동화하여 의료진의 업무 흐름을 간소화해줍니다.

## 기계에 대한 트레이닝이 더 쉽고 접근이 더 용이하다면 어떨까요?

PrisMax 시스템은 CRRT 및 체외혈액 요법에 대한 효율적인 학습을 통해 의료진의 확신과 환자 관리를 더욱 향상시킵니다.

\*6개국의 8개 ICU에서 PrisMax 시스템으로 305번 치료를 시범적으로 평가한 데이터를 기반으로 함.